


Gamma Station 2、Spectrum Station 2 をより便利に
お使いいただくために様々なオプションをご用意しました

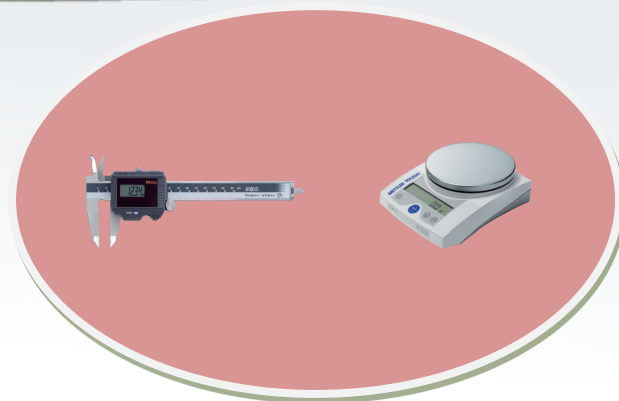

サンプルチェンジャオプション 試料情報入力オプション (Gamma Station 2)

特長

サンプルチェンジャ


- サンプルチェンジャを使用したスケジュール自動測定分析が可能

試料情報入力オプション (Gamma Station 2)

- 入力情報はの都度簡単入力が可能で、手書きの試料管理シートが不要
- 試料をバーコード管理し、誤った測定を防止
- 試料高さ、測定試料量を自動計算することで、ヒューマンエラーを防止

サンプルチェンジャオプション

- サンプルチェンジャ※¹を使用した自動測定分析が可能になります。
- 複数の試料について事前に測定予定を登録できるため、長期休暇の間も測定が可能です。
- 測定開始日時を指定できるため、早朝に複数試料を測定するルーチン業務に最適です。

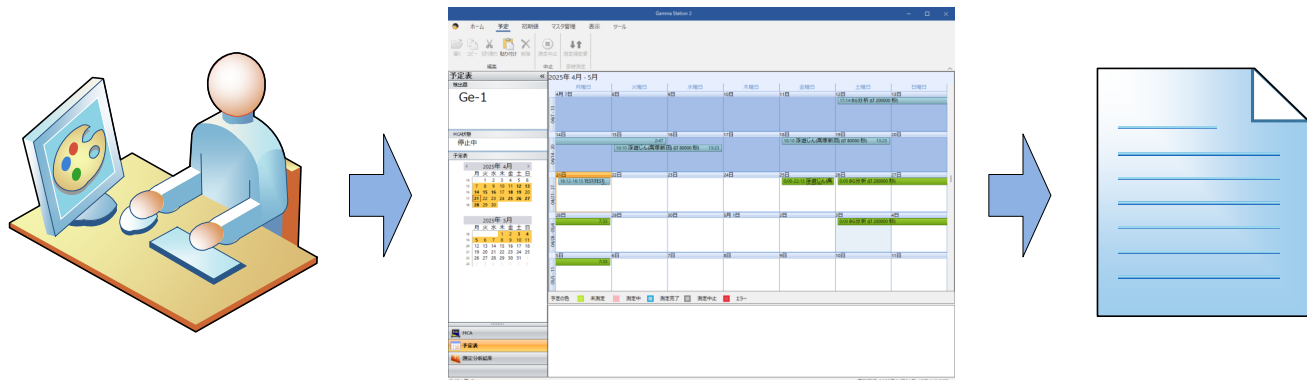

(1) 帰宅前に測定予定を登録


(2) 日時指定で休日でも早朝も測定可能

(3) 出社したら帳票を確認

※1) 対応モデルについては別途ご相談ください。

試料情報入力オプション(Gamma Station 2)

- 試料採取～測定までの状況に応じた入力ができます。もう管理シートは必要ありません。
- 試料をバーコード管理することで、試料の取り違いなどの誤った測定を防止します。
- 試料高さ、測定試料量を機器から直接読み込んで自動計算し、転記の際の誤記入等のヒューマンエラーを防止します。

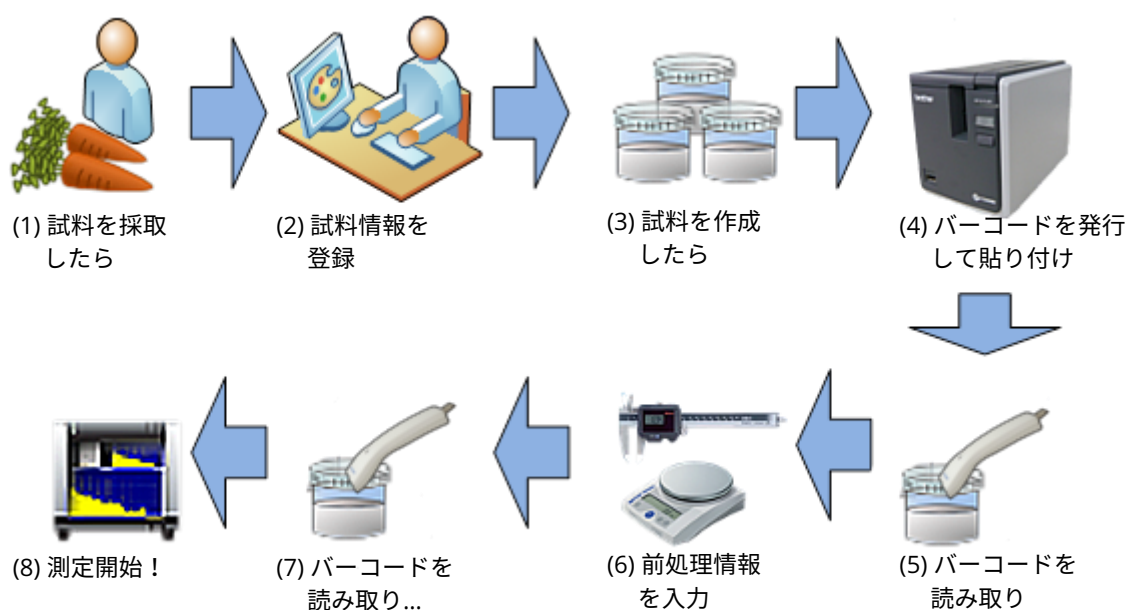

動作環境

- Spectrum Station 2 (DS-P1100)、Gamma Station 2 (DS-P1101) と同一環境で動作します。

仕様

■ サンプルチェンジャオプション

項目	仕様
伸和工業製	KS-100MK10、TS-100MK10、AS-100MK10
シンコーテクニカル製	SC-10T、SC-20、SC-20C

※他のモデルについてはお問い合わせください。

■ 試料情報入力オプション

項目	仕様
試料情報の入力	登録方法：新規／複製（いずれも複製可能） 登録内容：試料情報、前処理情報
印刷機能	バーコード／前処理シート／CSVファイル
試料高さの入力	材質A、材質Bの試料高さの入力が可能 平均高さを自動算出（測定点：最大10点）
重量の入力	試料重量（容器重量込）と風袋重量から試料重量を求めます

■ オプション製品

製品名	モデル
サンプルチェンジャオプション （Gamma Station 2/Spectrum Station 2）	DS-P1102
試料情報入力オプション（Gamma Station 2）	DS-P1103

■ 推奨機器

機器	モデル
ラベルプリンター	Brother社製ピータッチ PT-P950NW
バーコードリーダー	ウエルキャット社製 USBレーザーリーダ Stream7S-USB
デジタルノギス	ミツトヨ社製 スーパーキャリパCD67-S15PM（USB接続）
電子天秤	エー・アンド・デイ社製 汎用電子天秤 FZ-3000i（USB接続） ザルトリウス社製 電子天秤 QUINTIX124-1SJP

※他のモデルについてはお問い合わせください。

※製品の改良に伴い、予告なく記載内容を変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。（2025年5月 Rev.3）



セイコー・イー・ジー・アンド・ジー株式会社

本社・東京都中央区八丁堀 2-26-9 グランデビルディング 6F 〒104-0032
電話番号：03-5542-3101(代表) ファクシミリ：03-5542-3109
<https://www.sii.co.jp/segg/>

営業課	中央区八丁堀 2-26-9 グランデビルディング 6F	〒104-0032	電話番号：03-5542-3104	ファクシミリ：03-5542-3109
システム営業課	中央区八丁堀 2-26-9 グランデビルディング 6F	〒104-0032	電話番号：03-5542-3104	ファクシミリ：03-5542-3109
大阪営業所	大阪市北区豊崎 3-2-1 淀川 5 番館ビル 5F	〒531-0072	電話番号：06-7711-0855	ファクシミリ：06-7711-0856
水戸営業所	水戸市大町 1-2-40 朝日生命ビル 5F	〒310-0062	電話番号：029-227-4474	ファクシミリ：029-227-7734
カスタマーサービス	松戸市高塚新田 563	〒270-2222	電話番号：047-709-5743	ファクシミリ：047-709-5745
システム技術課	松戸市高塚新田 563	〒270-2222	電話番号：047-709-5746	ファクシミリ：047-709-5747